

Pana·Max2

Velocidad : 350.000~450.000 min⁻¹

- Cuerpo de acero inoxidable
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de cabezal limpio
- Portafresas NSK Ultra Push Chuck
- Spray simple
- Válvula Reguladora de Presión de Aire (M4/B2)

Conexión directa / Por enroscado



MODELO **Pana-Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**
• M4 Midwest 4 vías
• Tamaño del cabezal : ø11,2 x H13,4mm



MODELO **Pana-Max2 B2** CÓDIGO DE PEDIDO **P1155**
• Borden 2 vías
• Tamaño del cabezal : ø11,2 x H13,4mm



MODELO **Pana-Max2R M4** CÓDIGO DE PEDIDO **T1029**
• M4 Midwest 4 vías
• Tamaño del cabezal : ø11,2 x H12,5mm



MODELO **Pana-Max2R B2** CÓDIGO DE PEDIDO **T1030**
• Borden 2 vías
• Tamaño del cabezal : ø11,2 x H12,5mm

Piezas de repuesto

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO	MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
PAX2-SU03		P1190	PAX2-SU04		P1190050	PAX2-SU05		P1190765
PAX2R-S03		T1040	PAX2R-S04		T1040050	Llave de Fresas		T100702



Lavable en el termodesinfectador



Esterilizable en el autoclave hasta 135° C

NAKANISHI INC. www.nsk-inc.com

700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan
TEL : +81 289 64 3380 FAX : +81 289 62 5636

NSK America Latina Ltda www.nsk-inc.com

Rua Blumenau, 735 - Sala 02, América, Joinville, SC 89204-251, Brazil
TEL : +55 47 38046569 FAX : +55 47 38045248

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

REF PR-D902SA Ver.2 16.00.00.0

NSK

CREATE IT.

SUPERIORIDAD
TECNOLÓGICA
FIABILIDAD
INGUUALABLE



Pana·Max2

Pana-Max2

LA EVOLUCIÓN DE PANA-MAX

Pana-Max2 ofrece mucha más resistencia y potencia que los modelos anteriores, siendo al mismo tiempo tan fácil de manejar como sus predecesores. Su diseño elegante proporciona una máxima visibilidad del campo de trabajo y una accesibilidad óptima a todas las áreas de la cavidad bucal.



Durabilidad Insuperable


Construido para destacarse en situaciones clínicas. Presenta un cuerpo de acero inoxidable a prueba de arañazos y un cabezal más robusto.

Gracias al diseño del cabezal resistente a los golpes, el rotor de la turbina Pana-Max2 no sufrirá daño alguno aún si la herramienta es arrojada desde una altura de dos metros contra un piso de cemento.





Duración Excepcional

El nuevo diseño de la estructura de los rodamientos ofrece mayor resistencia al desgaste y una vida útil más prolongada.

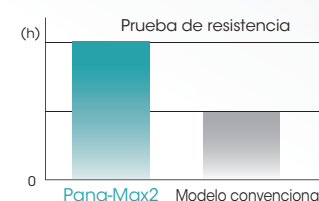

La sólida estructura de acero inoxidable le permite soportar repetidas esterilizaciones en autoclave y lavados en el termodesinfectador

30% Potencia Extra

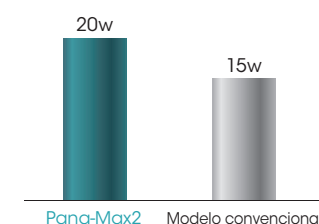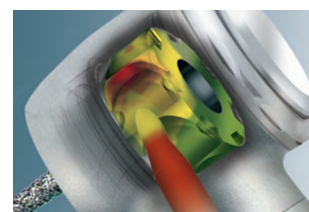

Pana-Max2 es espectacularmente más potente que sus predecesores gracias a la combinación de las tecnologías de simulación de turbinas de aire NSK. Con una potencia máxima de 20 watts, este nuevo modelo posee la potencia nominal máxima en su categoría. Esta potencia concentrada, junto con la alta precisión de rotación de la fresa, crea un efecto sinérgico que asegura tratamientos rápidos y precisos.


Sistema de Cabezal Limpio

El sistema de cabezal limpio patentado por NSK es un mecanismo especial diseñado para evitar automáticamente la entrada de los fluidos orales y otros contaminantes en el cabezal de la pieza de mano, prolongando la vida de los rodamientos.



Cuerpo fino y esbelto de acero inoxidable

El cuerpo de diseño fino y esbelto garantiza una excelente accesibilidad a la toda la cavidad bucal. Esto maximiza la visibilidad del campo de trabajo, permitiéndole trabajar con una eficiencia total.

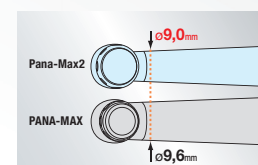


Cartuchos fácilmente cambiables

Los cartuchos de Pana-Max2 son duraderos y fáciles de cambiar, lo que ayuda a controlar costes y minimizar tiempo de inactividad. Una vez que el cartucho ha sido intercambiado el instrumento funciona como nuevo.



Válvula Reguladora de Presión de Aire

La presión interna de la válvula reguladora mantiene un suministro estable de presión a la sección de la cabeza de la pieza de mano, previniendo el deterioro prematuro del rotor debido a una presión excesiva.

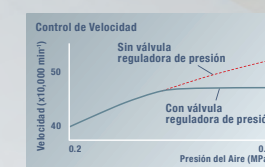

Portafresas NSK Ultra Push Chuck

El portafresas de triple agarre patentado Ultra Push Chuck de NSK permite reemplazar la fresa fácilmente. El mecanismo de bloqueo automático asegura que la fresa permanezca en su lugar aún cuando se le aplique una carga de torque más alta durante procedimientos de corte.



Spray simple

El spray simple de NSK asegura el enfriamiento de la fresa y el campo de trabajo durante el corte.

